



Manuale d'istruzioni



Gli utenti di questo dispositivo possono trarre vantaggio dal suo utilizzo solo se leggono e comprendono tutte le informazioni contenute del Manuale d'istruzioni.

È necessario seguire tutte le istruzioni del Manuale d'istruzioni.

Non esitate a contattarci per eventuali domande sul dispositivo Omnilux CLEAR™, o su questo Manuale d'istruzioni.

GlobalMed Technologies Co.  
163 Camino Dorado Suite B  
Napa, CA 94558  
Tel: +1-707-224-0200  
[www.omniluxled.com](http://www.omniluxled.com)

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di iSMART Development Ltd e vengono fornite con l'intesa che saranno mantenute riservate ai destinatari e che non saranno riprodotte e/o utilizzate per scopi commerciali senza il consenso scritto di iSMART Developments Ltd.

## Contenuti

| Intestazione della sezione                           | Numero di pagina |
|------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Introduzione                                      | 3                |
| 2. Chi dovrebbe utilizzare Omnilux CLEAR™?           | 4                |
| 3. Descrizione del dispositivo                       | 5                |
| 3.1 Usoprevisto                                      | 5                |
| 4. Quando non si deve usare Omnilux CLEAR?           | 6                |
| 4.1 Controindicazioni, avvertenze e precauzioni      | 6                |
| 5. Rischi e benefici                                 | 8                |
| 5.1 Rischi potenziali                                | 8                |
| 5.2 Potenziali benefici                              | 8                |
| 6. Prima configurazione                              | 9                |
| 6.1 Disimballaggio e ricarica di Omnilux CLEAR       | 9                |
| 6.2 Collegamento di Omnilux CLEAR al comando manuale | 9                |
| 6.3 Test di sensibilizzazione                        | 9                |
| 7. Utilizzo del dispositivo Omnilux CLEAR 7.1        | 10               |
| Raccomandazioni al trattamento                       | 10               |
| 7.2 Indossare il dispositivo Omnilux CLEAR 7.3       | 10               |
| Esecuzione di un trattamento                         | 10               |
| 8. Cura e manutenzione                               | 11               |
| 8.1 Pulizia del dispositivo Omnilux CLEAR 8.2        | 11               |
| Smaltimento                                          | 11               |
| 8.3 Risoluzione dei problemi                         | 12               |
| 9. Etichettatura                                     | 12               |
| 10. Riciclaggio                                      | 12               |
| 11. Specifiche tecniche                              | 13               |
| 12. Spiegazione dei simboli                          | 13               |
| 13. Garanzia                                         | 15               |

### 1. Introduzione

Grazie per aver scelto Omnilux CLEAR™.

Il dispositivo Omnilux CLEAR LED emette luce nella regione rossa e blu dello spettro luminoso, è pertanto indicato per il trattamento dell'acne vulgaris lieve, o moderata sul viso.

(Per ulteriori informazioni su come capire se si soffre di acne lieve, o moderata, quindi se Omnilux CLEAR è il trattamento più adeguato, consultare il paragrafo 2 - pagina 4).

Gli utenti di questo dispositivo possono trarre vantaggio dal suo utilizzo, solo se leggono e comprendono tutte le informazioni contenute nel Manuale d'istruzioni.

È necessario seguire tutte le istruzioni del Manuale d'istruzioni.

Per eventuali domande su Omnilux CLEAR, o su questo Manuale d'istruzioni, non esitate a contattarci.

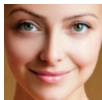
Prima di utilizzare il dispositivo Omnilux CLEAR, è necessario effettuare un test



di sensibilizzazione e attendere 6 ore. (vedere sezione 6.3 - pagina 9).

## 2. Chi dovrebbe utilizzare Omnilux CLEAR?

L'aspetto tipico dell'acne è un misto di: pelle grassa, brufoli, macchie rosse, macchie gialle piene di pus e cicatrici. Utilizzate questa tabella per capire se Omnilux CLEAR è adatto a voi.

| Tipo di acne                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Adatto per Omnilux CLEAR                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelle uniforme, senza imperfezioni           |  Nessun brufolo, o foruncolo giallo pieno di pus.<br>Nessun punto bianco, o nero                                   | <b>NO</b><br>Omnilux CLEAR NON è indicato per la pelle senza imperfezioni.<br>Omnilux CLEAR NON deve essere utilizzato per prevenire la formazione di foruncoli e macchie |
| Acne lieve                                   |  Alcuni brufoli o macchie, alcune foruncoli pieni di pus, alcuni punti bianchi, o punti neri                       | <b>Sì</b><br>L'acne lieve è adatta al trattamento con Omnilux Clear                                                                                                       |
| Acne moderata                                |  Alcuni brufoli o macchie, alcuni foruncoli pieni di pus, solo alcuni piccoli noduli. Alcuni punti bianchi, o neri | <b>Sì</b><br>L'acne moderata è indicata per il trattamento con Omnilux CLEAR                                                                                              |
| Acne grave                                   |  Molti brufoli, o macchie, molti foruncoli pieni di pus. molti noduli                                              | <b>NO</b><br>Omnilux CLEAR NON è indicato per l'acne grave. Consultare il proprio medico per un trattamento più appropriato.                                              |
| Punti bianchi o punti neri o acne comedonica |  Molti punti bianchi o neri. Nessun brufolo o macchia. Nessun punto pieno di pus                                  | <b>NO</b><br>Omnilux CLEAR NON è indicato per i punti bianchi o neri. Consultare il medico per un trattamento più appropriato.                                            |



Per sapere se Omnilux CLEAR fa al caso vostro e per trovare un elenco completo di chi può e chi non può usare Omnilux CLEAR, scansionate il codice QR.

## 3. Descrizione del dispositivo

1. Dispositivo CLEAR, in silicone flessibile con occhiale integrato
2. Comando manuale (contenente una batteria al litio) e alimentatore
3. Adattatori specifici per ogni Paese
4. 2 fasce regolabili
5. Borsa da trasporto



Omnilux CLEAR è un dispositivo per la terapia della luce LED, per uso individuale. Produce una banda di luce fredda e stretta che riduce l'acne vulgaris da lieve, o moderata sul viso. È costituito da un dispositivo flessibile in silicone, che contiene diodi ad emissione luminosa (LED) e un comando manuale. I LED generano la luce. Il dispositivo si indossa sul viso ed è tenuto in posizione da fasce di velcro regolabili. Il comando accende e spegne i LED e controlla l'alimentazione della maschera. Inoltre, contiene una batteria ricaricabile ai polimeri di litio e utilizza una schermata visibile composta da 3 micro LED per mostrare all'utente lo stato di carica della batteria del dispositivo. L'alimentatore serve a caricare la batteria al litio ed è collegato ad una fonte di corrente adeguata tramite una spina di ingresso a 2 o 3 poli e una spina a muro. Il cavo di alimentazione è collegato al comando manuale, tramite un connettore micro USB A-C standard.

Omnilux CLEAR non può essere utilizzato durante la carica.

Il dispositivo non viene utilizzato per effettuare misurazioni di alcun tipo o per trarre conclusioni sull'indicazione al trattamento. Il dispositivo non richiede controlli sull'emissione luminosa, poiché i LED non si affievoliscono con l'età.

### 3.1 Uso previsto

Omnilux CLEAR è un dispositivo LED che emette energia nella regione rossa e blu dello spettro luminoso ed è specificamente indicato per trattare l'acne vulgaris lieve, o moderata sul viso attraverso un meccanismo non termico chiamato terapia fotodinamica endogena.

#### 4. Quando non si deve usare Omnilux CLEAR?

##### 4.1 Controindicazioni, avvertenze e precauzioni

###### Controindicazioni

- **NON** condividere Omnilux CLEAR con altre persone. Il dispositivo Omnilux CLEAR è destinato all'uso da parte di una sola persona.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR per trattare altre condizioni oltre a quelle elencate nelle indicazioni d'uso (acne vulgaris lieve, o moderata). Il dispositivo Omnilux CLEAR non è stato testato per condizioni diverse da quelle elencate e il rischio è sconosciuto.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR in caso di gravidanza, gravidanza programmata, o allattamento. Il dispositivo Omnilux CLEAR NON è stato testato su donne in gravidanza, o in fase di allattamento e pertanto, il rischio per il feto, il neonato e la donna incinta non è noto.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si è bambini di età inferiore ai 14 anni. La sicurezza del dispositivo per i bambini di età inferiore ai 14 anni NON è stata testata ed il rischio è sconosciuto.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si soffre di mal di testa indotto dalla luce.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si soffre di condizioni genetiche agli occhi. Il dispositivo Omnilux CLEAR NON è stato testato su soggetti affetti da patologie genetiche agli occhi e pertanto i rischi non sono noti. In caso di dubbi su eventuali patologie oculari correlate all'uso di Omnilux CLEAR, contattare il proprio oculista o medico.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si soffre di disturbi fotosensibili (sensibilizzazione alla luce) dell'occhio. Il dispositivo Omnilux CLEAR NON è stato testato su soggetti affetti da disturbi fotosensibili dell'occhio e pertanto i rischi sono sconosciuti. In caso di dubbi su eventuali patologie oculari correlate, contattare il proprio oculista o medico.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si soffre di lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza il dispositivo Omnilux CLEAR per trattare il lupus eritematoso, l'eczema fotosensibile o l'albinismo, si può provocare una grave reazione cutanea.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si soffre di disturbi di fotosensibilità (sensibilizzazione alla luce) della pelle. Se si utilizza il dispositivo Omnilux CLEAR e si soffre di un disturbo fotosensibile, si può provocare una reazione grave.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità. Se si utilizza il dispositivo Omnilux CLEAR e si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità, si può provocare una grave reazione cutanea.

Per un elenco completo dei farmaci che possono causare fotosensibilità, visitare il sito: [www.omniluxled.com](http://www.omniluxled.com).

 **La fotosensibilità** è un effetto collaterale comune di vari farmaci. Questi possono includere alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. In caso di dubbi su eventuali farmaci assunti, consultare il proprio medico curante.

 **Anche altre sostanze non elencate possono causare fotosensibilità.**

- Esempi comuni di queste sostanze sono:  
L'iperico, il catrame di carbone, i deodoranti, i saponi antibatterici, i dolcificanti artificiali, il naftalene (naftalina), i prodotti petroliferi, gli agenti sbiancanti presenti nei detersivi per il bucato e il solfuro di cadmio (una sostanza chimica iniettata nella pelle durante i tatuaggi).

 **Avvertenze**

- Prima di utilizzare Omnilux CLEAR, è necessario effettuare un test di sensibilizzazione.  
(vedere sezione 6.3 - pagina 9).
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso. L'uso di Omnilux CLEAR in modo diverso da quello specificato nelle presenti istruzioni per l'uso, non è stato testato e il rischio è sconosciuto.
- **Spegner e rimuovere** immediatamente Omnilux CLEAR se si sente caldo, o se si sente un calore fastidioso sulla pelle.
- **Sospendere** l'uso di Omnilux CLEAR in caso di mal di testa, alterazioni della vista, o dolore agli occhi.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR senza aver prima rimosso creme, sieri, lozioni e make-up PRIMA del trattamento. Alcuni ingredienti di questi prodotti possono causare una sensibilizzazione alla luce o ridurre l'effetto del trattamento.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR in prossimità dell'acqua o in qualsiasi luogo in cui l'acqua possa riversarsi sul dispositivo
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se si pensa che possa essere entrato in contatto con l'acqua.
- Tenere Omnilux lontano da superfici calde.
- **NON** tentare di modificare Omnilux CLEAR in alcun modo. La modifica del dispositivo Omnilux CLEAR, comporta l'annullamento della garanzia. La modifica del dispositivo Omnilux CLEAR potrebbe causare una scossa elettrica quando il dispositivo viene riutilizzato. Il dispositivo non contiene parti riparabili.
- **NON** utilizzare Omnilux CLEAR se il dispositivo, la batteria o la spina di ricarica sono in qualche modo danneggiati.

### **Sicurezza generale**

Il dispositivo Omnilux CLEAR è un dispositivo elettrico che, in determinate circostanze, può presentare un rischio di scossa elettrica per l'utente. Si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzioni e di seguire le istruzioni in esso contenute per garantire la massima sicurezza durante il funzionamento.

### **Precauzioni**

- Le fasce Omnilux CLEAR contengono una miscela di poliestere, nylon e lycra. Se siete allergici a uno di questi materiali, potreste non essere in grado di utilizzare le fasce fornite.
- Il dispositivo Omnilux CLEAR non può essere utilizzato in modalità di ricarica. Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire la maschera. Tutte le superfici del dispositivo Omnilux CLEAR possono essere pulite seguendo le istruzioni per la pulizia riportate nella Sezione 8.1 - pagina 11.
- NON utilizzare altri prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati nelle istruzioni per la pulizia. L'uso di altri prodotti per la pulizia possono danneggiare Omnilux CLEAR.
- Conservare Omnilux CLEAR in posizione piana e a temperatura ambiente, in ambienti asciutti e al riparo dalla luce solare diretta.

## **5. Rischi e benefici**

### **5.1 Rischi potenziali**

- Subito dopo il trattamento la pelle può apparire arrossata. La pelle dovrebbe tornare normale entro 1-2 ore.
- Alcuni utenti hanno segnalato pigmentazione, desquamazione della pelle, associato a prurito e secchezza. Si tratta di fenomeni transitori che scompaiono nel giro di pochi giorni.
- Mal di testa temporaneo subito dopo il trattamento con la luce. Il mal di testa può essere trattato con un analgesico da banco appropriato e con la reidratazione.
- Questo elenco, sebbene non esaustivo, riporta gli effetti collaterali più comunemente segnalati.

### **5.2 Potenziali benefici**

Le persone che si sono sottoposte a un ciclo di 4 trattamenti settimanali per 6 settimane con il dispositivo Omnilux CLEAR riferiscono una riduzione dell'acne vulgaris lieve, o moderata.

## **6. Prima configurazione**

### **6.1 Disimballaggio e ricarica di Omnilux CLEAR**

- Il dispositivo Omnilux CLEAR utilizza un comando manuale che contiene una batteria ai polimeri di litio. Omnilux CLEAR non può essere utilizzato in modalità di ricarica.
- La durata della batteria al litio può essere massimizzata lasciandola caricare e poi scaricare completamente durante l'uso regolare.
- Disimballare Omnilux CLEAR e controllare le parti descritte nella Sezione 3, pagina 5.
- Prima dell'uso, caricare completamente la batteria.
- Per caricare la batteria di Omnilux CLEAR, inserire il cavo USB-C nel comando manuale. Inserire l'alimentatore in una presa elettrica adeguata e premere il pulsante ON/OFF sul comando.
- I 3 LED del comando iniziano a lampeggiare per indicare la carica. La batteria Omnilux CLEAR è completamente carica quando i tre LED del controller rimangono accesi.

### **6.2 Collegamento di Omnilux CLEAR al comando manuale**

Collegare la maschera Omnilux CLEAR inserendo il connettore USB A della maschera nella porta USB del comando.

### **6.3 Test di sensibilizzazione**

Prima di effettuare il primo trattamento, è necessario eseguire un test di sensibilizzazione. Seguire la guida passo, passo, riportata di seguito:

- Posizionare il dispositivo Omnilux CLEAR sul braccio interno.
- Premere il pulsante ON/OFF sul controller finché le luci non si accendono e lasciare che il dispositivo funzioni per l'intero programma di trattamento di 10 minuti.
- In qualsiasi momento, se la pelle si sente calda o si sente fastidio, spegnere immediatamente il dispositivo e rimuoverlo dalla pelle.
- Dopo il trattamento, attendere almeno 6 ore. Se la pelle dell'interno del braccio è arrossata o pruriginosa, Omnilux CLEAR non è adatto a voi.

## 7. Utilizzo del dispositivo Omnilux CLEAR



**Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) e i campi elettromagnetici (EMF), nell'ambiente domestico e nelle vicinanze il dispositivo Omnilux CLEAR, deve essere tenuto lontano da apparecchiature a radiofrequenza (RF) per evitare interferenze.**

### 7.1 Raccomandazioni di trattamento

- Le persone che si sono sottoposte a un ciclo di 4 trattamenti settimanali per 6 settimane con il dispositivo Omnilux CLEAR riferiscono una riduzione dell'acne vulgaris lieve, o moderata.

### 7.2 Indossare il dispositivo Omnilux CLEAR

- Omnilux CLEAR è dotato di due fasce in velcro regolabili che consentono di indossare comodamente la maschera.
- Per montare la maschera, inserire le fasce attraverso i fori di ingresso su entrambi i lati della maschera.
- Avvolgere le fasce intorno alla testa e fissarle saldamente. Regolarle se necessario.

### 7.3 Esecuzione di un trattamento

- Detergere ed esfoliare la pelle per rimuovere ogni traccia di crema o trattamento.
- Posizionare Omnilux CLEAR sul viso e fissarlo con le fasce regolabili.
- Collegare il dispositivo Omnilux CLEAR al comando manuale e premere il pulsante ON/OFF. Il dispositivo si spegne dopo 10 minuti di trattamento. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il pulsante ON/OFF sul comando.
- Rimuovere il dispositivo, applicare il normale trattamento sulla pelle.
- Pulire il dispositivo utilizzando un panno a base d'acqua o un panno umido e pulito. Assicurarsi che il dispositivo NON sia in carica durante la pulizia.
- Per ottenere risultati ottimali, trattare per 4 giorni alla settimana per 6 settimane.

## 8. Cura e manutenzione

- La durata della batteria al litio può essere massimizzata lasciandola caricare e scaricare completamente durante l'uso regolare.
- Conservare il dispositivo Omnilux CLEAR in posizione piana, a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Utilizzare la borsa per il trasporto fornita per riporre il dispositivo.
- Evitare di conservare l'apparecchio Omnilux CLEAR in ambienti polverosi, alla luce diretta del sole, o in condizioni di umidità.
- Il dispositivo Omnilux CLEAR non contiene parti riparabili.
- Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire il dispositivo seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.

Se si seguono le istruzioni per la cura e la manutenzione di Omnilux CLEAR, la durata di vita di Omnilux CLEAR è di almeno 2 anni.

### 8.1 Pulizia del dispositivo Omnilux CLEAR



**NON** utilizzare altri prodotti per la pulizia perché potrebbero danneggiare le plastiche.

- Pulire la parte anteriore e posteriore del dispositivo con un panno a base d'acqua, o un panno umido e pulito. Le macchie più ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcol al 70%.

### 8.2 Smaltimento



NON smaltire alcuna parte del dispositivo in un impianto di rifiuti domestici.



L'unità di controllo Omnilux CLEAR contiene un polimero agli ioni di litio batteria. Per proteggere l'ambiente, si prega di imballare e restituire l'unità al produttore o al suo rappresentante al termine del ciclo di vita



o di smaltire in modo sicuro il dispositivo seguendo le linee guida locali.

### 8.3 Risoluzione dei problemi

| Problema                                               | Possibile causa                                               | Azione                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna luce blu o rossa da Omnilux CLEAR              | il dispositivo e' scarico di batteria                         | Collegare il comando al caricabatterie assicurandosi che il tutto sia collegato e lasciare in carica fino a quando i tre LED di segnalazione sul comando rimangono accesi e NON lampeggiano. |
| Nessuna luce blu o rossa da Omnilux CLEAR              | Dispositivo (maschera) collegato a una presa elettrica        | Scollegare il connettore USB del comando                                                                                                                                                     |
| I LED NON si spengono dopo 10 minuti                   | Il dispositivo è difettoso                                    | Restituzione al fornitore                                                                                                                                                                    |
| I LED lampeggiano continuamente durante il trattamento | Omnilux CLEAR non è inserito correttamente al comando manuale | Assicurarsi che il comando e il dispositivo Omnilux CLEAR ,siano collegati correttamente                                                                                                     |

Se le azioni suggerite non risolvono il problema, o se il problema si ripresenta e il dispositivo rientra nel periodo di garanzia, restituirlo al fornitore.



- NON tentare di indagare ulteriormente.
- NON tentare di modificare il dispositivo in alcun modo. Omnilux CLEAR non ha parti che possono essere riparate da qualsiasi persona, o professionista

### 9. Etichettatura

L'etichetta fornita con il dispositivo contiene le seguenti informazioni

- Data di produzione
- Numero di catalogo e codice lotto
- Ambiente operativo

### 10. Riciclaggio



Questo simbolo indica: questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).



Questo simbolo indica che questo prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata, che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE).

Si consiglia di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale per far rimuovere la batteria ricaricabile da un professionista. Seguite le regole del vostro Paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici

ed elettronici e delle batterie ricaricabili. Un corretto smaltimento aiuta a prevenire danni all'ambiente e alla salute umana.

### 1.1 Specifiche tecniche

Tempo di programmazione :10 minuti fissi

Temperatura di funzionamento : da 0C a 40C

Temperatura di stoccaggio e trasporto: da -5 C a 55 C

Umidita' operativa: dal 30% al 95% senza condensa

Umidita' di stoccaggio e trasporto dal 20% al 85% senza condensa

Ingresso elettrico dell'adattatore di alimentazione: 100 - 240 Vac/ 47-63Hz 0,6A

Uscita elettrica:5V,9,62Wh o 2200mAh



Questo simbolo indica l'avvertenza di leggere la documentazione allegata prima dell'uso e di adottare tutte le precauzioni di sicurezza richieste



Questo simbolo indica: leggere il manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo



Questo simbolo indica: Omnilux Clear e' utilizzato come parte applicata tipo bf. B indica che e' utilizzata sul corpo, F indica che non e' collegata alla tensione di rete.



Questo simbolo indica: Conformità alle Direttive del Regno Unito in materia di salute, sicurezza e standard di protezione ambientale. UKCA è l'acronimo di conformità del Regno Unito



Questo simbolo indica: "prodotto da" e fornisce il nome e il luogo del produttore legale



Questo simbolo indica: ingresso per l'alimentazione. Questo simbolo indica che questo dispositivo deve essere caricato solo con l'adattatore fornito nella confezione. L'uso di altri adattatori potrebbe non essere sicuro e causare scosse elettriche. L'adattatore , ha le seguenti specifiche elettriche: 100-240VAC 47-63 Hz 0.6A Uscita elettrica 5V



Questo simbolo indica: Conservare all'asciutto.



Questo simbolo indica: Il numero di serie del dispositivo.



Questo simbolo indica: Il numero di catalogo del dispositivo Omnilux CLEAR.



Questo simbolo indica: Il codice del lotto del dispositivo Omnilux CLEAR.



Questo simbolo indica: Il connettore USB.



Questo simbolo indica: Il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.



Questo simbolo indica: Prodotto in Cina.



Questo simbolo indica: Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.



Questo simbolo indica: Le temperature di esercizio superiori e inferiori a cui il dispositivo Omnilux CLEAR può essere utilizzato in modo sicuro.



Questo simbolo indica: L'umidità operativa superiore e inferiore a cui il dispositivo Omnilux CLEAR può essere utilizzato in modo sicuro.



Questo simbolo indica: La confezione di cartone in cui Omnilux CLEAR è stato consegnato può essere riciclata.

IP22

Questo simbolo indica che: Il dispositivo è protetto contro un oggetto solido di dimensioni superiori a 12,5 mm, come un dito, e contro la caduta verticale di gocce d'acqua fino a 15 gradi dalla verticale.

## 13. Garanzia

**Registrate la vostra garanzia su**

**<https://omniluxled.com/pages/product-registration>**

### 13.1 Garanzia standard:

In condizioni di utilizzo normale, questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto originale contro i difetti di fabbricazione dei materiali o di lavorazione.

### 13.2 Eccezioni alla garanzia:

La batteria al litio è garantita per 1 anno dalla data di acquisto originale contro i difetti di fabbricazione dei materiali o di lavorazione.

La garanzia si estende solo all'acquirente originale.

La presente garanzia non copre i danni causati da quanto segue:

- Incidente, uso improprio, abuso o alterazione.
- Manutenzione da parte di persone non autorizzate.
- Collegamento a fonti di alimentazione non corrette
- Utilizzo di accessori non autorizzati

### 13.3 Cosa fare se il prodotto è difettoso

GlobalMed Technologies Co. o il suo distributore autorizzato non potranno essere responsabili di eventuali danni da incidenti, da eventi speciali o conseguenze derivanti dall'uso di questo prodotto. Tutte le garanzie implicite, comprese, ma non solo, le garanzie implicite di idoneità e commerciabilità, hanno una durata limitata a un anno dalla data di acquisto originale.

La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali, e l'utente può godere anche di altri diritti che variano da Paese a Paese. Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di garanzie incidentali o consequenziali, danni, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto alcune delle limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, scritte o orali, espresse mediante affermazione, promessa, descrizione, disegno, modello o campione. Tutte le garanzie diverse dalla presente, espresse o implicite comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare, sono declinate con la presente.

Registrate la vostra garanzia su **[www.omniluxled.com](https://omniluxled.com)**

Se il prodotto è difettoso durante il periodo di garanzia, contattare il fornitore.



**REDITOGLOW**

Distribuito da:

**REDITOGLOW**  
22 Great James Street  
WC1N 3ES - Londra  
Regno Unito  
[www.reditoglow.it](http://www.reditoglow.it)  
[info@reditoglow.it](mailto:info@reditoglow.it)